

# Vive tu vida

El concentrador de oxígeno portátil con nuestra más avanzada tecnología. SimplyGo, ¡Vive la diferencia en calidad de vida!



# SimplyGo, dondequiera que vaya.

Un día de compras, una visita a un museo, un agradable fin de semana o unas merecidas vacaciones, gracias a SimplyGo los pacientes con oxigenoterapia pueden disfrutar de todo lo que la vida les ofrece. SimplyGo goza de un diseño ligero y duradero, e incluye una práctica bolsa portátil y un carro con ruedas de fácil rodadura, por lo que está siempre listo para dar un paseo. Su maletín de accesorios le permite tener a mano todo lo que necesita, en cualquier ocasión.



SimplyGo es el primer concentrador de oxígeno de Philips que ofrece los beneficios de un modo de flujo continuo en un diseño ligero y fácil de transportar, de tan solo 4,5 kg. Ya no tiene que elegir entre una entrega de oxigenoterapia eficaz para los pacientes y el habitual peso del dispositivo. SimplyGo ofrece una solución que satisface las necesidades de la mayoría de sus pacientes con oxigenoterapia. Con SimplyGo, los pacientes tienen la flexibilidad de salir a disfrutar del día, acudir al trabajo, marcharse de fin de semana o descansar durante unas largas vacaciones.

La unidad cuenta con tres modos de suministro de oxígeno que se adaptan a la mayoría de las necesidades de los pacientes:

Modo Pulsado I SimplyGo detecta la respiración y realiza la administración de oxígeno necesaria.

Flujo continuo Administración continua de oxígeno entre 0,5 y 2 lpm.

El modo Pulsado con una mayor sensibilidad de activación para su uso durante el sueño. SimplyGo cambia automáticamente al flujo continuo de 2 lpm si no se detecta respiración.

### Con el oxígeno siempre a mano, los pacientes gozan de libertad para ir a cualquier lugar y a cualquier hora.


En casa, el concentrador fijo **EverFlo** es la solución ideal como complemento del dispositivo portátil **SimplyGo** para los pacientes que precisen oxigenoterapia en su domicilio.

Dado que **SimplyGo** y **EverFlo** utilizan **una tecnología sin administración**, eliminan las molestias de la administración recurrente de oxígeno y pueden contribuir a mejorar la independencia de los pacientes y su calidad de vida.\*

\*El oxígeno portátil aumenta la duración diaria de la oxígenoterapia en pacientes con EPOC y mejora la calidad de vida de los pacientes con mayor cumplimiento terapéutico. Vergeret et al. Eur Respir J 1989;2: 20-25

# SimplyGo. Fiabilidad y mantenimiento sencillo.

Los pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) dependen de equipos de oxigenoterapia que necesitan durante muchas horas\* al día. **SimplyGo** ofrece la independencia y la libertad que los pacientes merecen, combinadas en un diseño duradero capaz de resistir los golpes derivados de las actividades cotidianas y al mismo tiempo proveer un tratamiento eficaz.

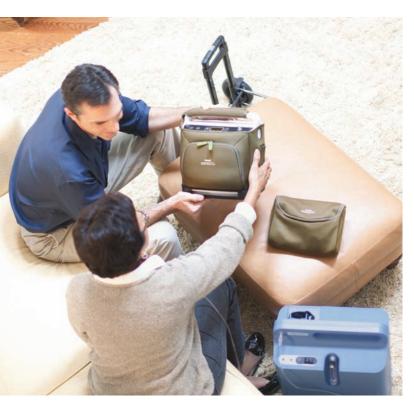

## Fiabilidad integrada

**SimplyGo** es el resultado de esfuerzos encaminados a establecer un nuevo estándar de fiabilidad en los concentradores portátiles.

**SimplyGo** ha sido diseñado, construido y probado rigurosamente con el objetivo de soportar las actividades cotidianas al acompañar al paciente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Durante su desarrollo, SimplyGo ha sido sometido a condiciones extremas, tales como impactos, vibraciones y temperaturas extremas, con el fin de garantizar un funcionamiento con total fiabilidad día tras día. Las 15.000 horas de vida útil del compresor le permiten confiar al máximo en sus prestaciones.

Esto se puede traducir en un menor número de llamadas de solicitud de información para usted y en menos frustraciones para los pacientes como consecuencia de posibles daños de la unidad.

Puede confiar en SimplyGo.

### Facilidad de mantenimiento.

**SimplyGo** facilita la labor de los proveedores de servicios médicos, ya que prácticamente no requiere mantenimiento preventivo ni por parte del paciente.

### SimplyGo es flexible:

- Puede optar entre dos, tres o cinco años de garantía.
   Elija el plan que mejor se adapte a sus necesidades.
- Las piezas y herramientas de repuesto del SimplyGo permiten que sus técnicos puedan reparar el dispositivo in situ, sin necesidad de devolverlo al fabricante.

#### Notas

\*Las directrices clínicas recomiendan que los pacientes con EPOC utilicen la oxigenoterapia durante al menos 15 horas al día para lograr efectos positivos sobre la supervivencia a largo plazo y sobre su calidad de vida. Por tanto, estos pacientes han de disponer de oxígeno tanto en su domicilio (oxigenoterapia fija) como fuera del mismo (oxigenoterapia portátil).

# Descripción del sistema





# Especificaciones de SimplyGo

Especificaciones del pi	roducto										
Concentración de oxígeno <sup>1</sup>		del 87	del 87 % al 96 % en todos los ajustes								
Ajustes de flujo											
Tamaño del bolo en modo de pulsado		2 = 24	1 = 12 ml 4 = 48 ml 2 = 24 ml 5 = 60 ml 3 = 36 ml 6 = 72 ml								
Modo de flujo continuo	0,5 lpn	0,5 lpm - 1 lpm - 1,5 lpm - 2 lpm									
Modo nocturno	minuto	Volúmenes de pulso variables en función de la frecuencia respiratoria, para mantener un volumen minuto constante en cada ajuste: 1 = 250 ml/min   2 = 500 ml/min   3 = 750 ml/min   4 = 1000 ml/min   5 = 1250 ml/min   6 = 1500 ml/min									
Nivel de ruido	43 dB	43 dB (nominal) en el ajuste de modo pulsado 2									
Alarmas		Pureza del oxígeno baja (< 83 %)   No respiración   Frecuencia respiratoria alta   Ausencia de flujo   Batería baja   Batería agotada   Fallo técnico del sistema									
Dimensiones		29,2 cr	29,2 cm x 25,4 cm x 15,2 cm								
Peso	4,5 kg	4,5 kg incluyendo batería									
Consumo de energía		150W	150W durante la carga 120W sin estar cargando								
Condiciones de funcionamiento											
Temperatura de funcional	5 °C a	5 °C a 40 °C									
Humedad relativa		15 % a	15 % al 95 %								
Altitud		Hasta	Hasta 3.048 metros								
Autonomía de la bate	ría										
Ajustes del modo							Ajustes del modo				
Pulsado <sup>2</sup>		2	3	4	5	6	Flujo continuo	0,5		2	
1 batería	3 h 42	3 h 30	3 h 06	2 h 42	2 h 18	1 h 54		3 h 06	2 h 18	0 h 42	
2 baterías	7 h 24	7 h 00	6 h 12	5 h 24	4 h 24	3 h 18		6 h 12	4 h 36	1 h 24	
3 baterías	11 h 06	10 h 30	9 h 18	8 h 06	6 h 54	5 h 42		9 h 18	6 h 54	2 h 06	
4 baterías	14 h 48	14 h 00	12 h 24	10 h 48	9 h 12	7 h 36		12 h 24	9 h 12	2 h 48	
Tiempo de carga	2 - 3 horas por batería si está completamente descargada										

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Basado en una presión atmosférica de 101 kPa a 21 °C

## Información para pedidos

and the second of the second o	
Sistema internacional SimplyGo	Referencia
Incluye: Concentrador portátil de oxígeno SimplyGo, bolsa portátil, carro, una batería recargable de iones de litio, cables de alimentación de CC y CA, maletín de accesorios y manual del usuario	1069058
Accesorios	Referencia
Carro de transporte	1074885
Bolsa portátil SimplyGo	1082663
Batería de iones de litio	1082662
Cable de alimentación (estándar europeo)	1082665
Cargador de batería externa (enchufe europeo)	900-118
Cargador de batería externa (enchufe para el Reino Unido/Irlanda)	900-119
Bolsa de accesorios	1083696
Fuente de alimentación de CA	1082661
Cargador para coche de CC	1083692
Cable de avión de CC	1083693
Bolsa del humidificador	1083699
Tubo de conexión del humidificador	1039642
Opciones de garantía	Referencia
SimplyGo 1 año de garantía extendida	1097575
SimplyGo 2 años de garantía extendida	1097574
SimplyGo 3 años de garantía extendida	1097576

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Basado en 20 respiraciones por minuto

### Contacto

### Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

#### Contacte con nosotros en

www.philips.com/healthcare healthcare@philips.com

Asia +49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África +49 7031 463 2254

América Latina +55 11 2125 0744

Norteamérica +1 425 487 7000 800 285 5585 (toll free, US only) Philips Respironics 1010 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668

Servicio de Atención al Cliente +1 724 387 4000 800 345 6443 (toll free, US only)

Philips Respironics Sede Internacional +33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico +65 6882 5282

Philips Respironics Australia +61 (2) 9947 0440 1300 766 488 (toll free, Australia only)

Philips Respironics China +86 400 828 6665 +86 800 828 6665 Philips Respironics Deutschland +49 8152 93 06 0

Philips Respironics Francia +33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italia +39 039 203 1

Philips Respironics Suecia +46 8 120 45 900

Philips Respironics Suiza +41 6 27 45 17 50

Philips Respironics UK +44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics, SimplyGo y EverFlo son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Reservados todos los derechos

### Visítenos en www.philips.es/respironics



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

PRECAUCIÓN: La ley federal de EE. UU. limita la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.